

KILAVUZ

Gece Pulsoksimetrisi



VIOLLIER

Önemli Bilgiler

Cihazı deneme amacıyla çalıştırmayınız → Cihaz tekrar kapatılamaz.

- Muayeneden önce oje veya sahte tırnakları çıkartınız.
- Oksijen besleme sensörünü, ve eşzamanlı olarak takılacak 24 saatlik tansiyon aletinin manşetini aynı uzva bağlamayınız.
- Cihazı yatağa yatmadan önce monte ediniz ve başlatınız.
- Kayıt süresi azami 8 saattir, 20 kg ve üzeri hastalar için uygundur.
- Cihazı CT, MRI ve röntgen yakınlarında kullanmayınız.
- Cep telefonları, güçlü elektromanyetik kaynaklar ve elektrikli battaniyeler kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Hasta tutanağı

Lütfen hastayı, hasta protokolünün eksiksiz ve doğru doldurulmasının teşhis açısından önemli olduğu konusunda bilgilendiriniz.

Lütfen kurşun kalem yerine siyah tükenmez kalem kullanın.

Kayıt başlangıcını ve bitişini tarih ve saatle birlikte not ediniz.

Tanımlama ve analiz


- Hastanın kimlik bilgileri
- tarafınızca kaydedilmiş olan tarih ve kabulün tam başlama saati
- Viollier tarafından sipariş formuna kaydedilen cihaz ve parmak sensörü numarası

Geräte-Nr. 010

Fingersensor-Nr. 015


Lütfen sadece üzerinde adresinizin önceden yazılı olduğu birlikte verilmiş sipariş formunu kullanınız.

Cihazın Bağlanması

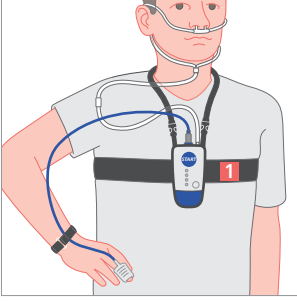


Cihazı yatağa yatmadan önce monte ediniz


- Cihazı ve ayrıca göğüs kemerini doğrudan cildinizin üzerinde taşıyınız.
- Cihazla birlikte boyun askısını kafanızdan geçiriniz.
- Cihazı **göğüs kemeri 1** ile göğüs kemiği hizasında ortaya sabitleyiniz → **erkeklerde meme ucu hizasına, kadınlarda göğüsün üst kısmına.**
- Kemer iyice sıkınız, ancak kemer, solunumu engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
- Burun sensörünü burnun altına yerleştiriniz. **Deliği 2** burun deliklerinin altına konumlandırınız.
- Kablo kulakların arkasından geçiriniz, **kablo iticisini 3** çenenin altından sıkınız.

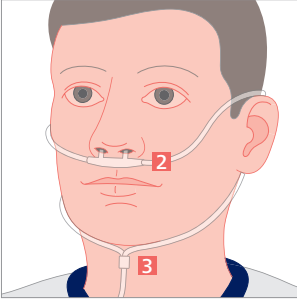

Parmak sensörünün sabitlenmesi


- Üzerinde el tırnağı sembolü olan oksijenle besleme sensörünü yukarıya parmağınızın ucuna takınız. Parmak sensörünü, parmak ucu görünene dek parmağın üzerine geçiriniz. Parmak sensörü **4** gece esnasında başka bir parmağa takılabilir.
- Uygun olan parmaklar: **İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağı (ojesiz).**
- Sensör kablосunu cırt cırtla bileğe sabitleyiniz.

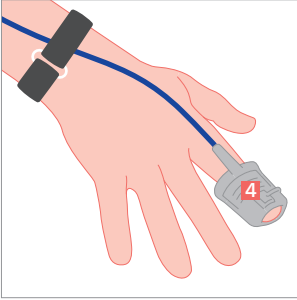

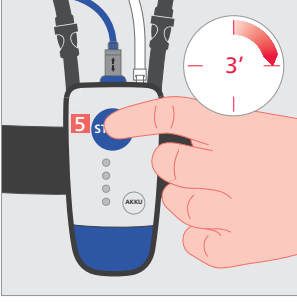

Cihazın çalıştırılması

- Ön **mavi** başlat tuşuna **5** 3 saniye boyunca basınız.
- Kayıt sırasında **yeşil** ışık **6** dört saniyelik döngülerle yanar. Bunun yanı sıra **kırmızı** ışık **7** belirirse parmak sensörü doğru konumlandırılmamıştır → lütfen düzeltiniz.
- Parmak sensörünün / burun sensörünün gece yerinden çıkması durumunda, lütfen yeniden takın.

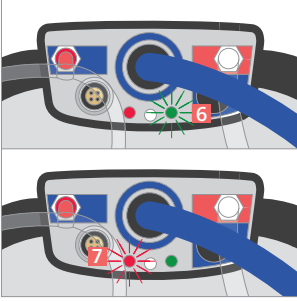

→ Sabah cihazı çıkartınız, kabloları takılı bırakınız ve cihazı geri gönderiniz.

Cihaz 8 saat sonra otomatik olarak kapanmaktadır.

→  VIOLLIER



Aksesuar

- Çantalı ve ayarlanabilir boyun askılı cihaz
- Bileğe sabitlemek için ayarlanabilir göğüs kemeri (uzun) ve cırt cırt (kısa)
- Takılı bağlantı kabloları ile birlikte oksijenle besleme sensörü
- Takılı kablo ile birlikte burun sensörü
- Sipariş formu, hasta tutanağı ve kullanma talimatı
- Geri göndermek için kırmızı kapatma klips

Geri gönderme

Lütfen kaydınızı tamamladıktan sonra cihazı takılı kabloları, kemerleri, cırt cırtları, oksijen besleme sensörü, sipariş formu ve hasta tutanağı ile birlikte geri gönderiniz.

- müşteri hizmetleri üzerinden
- posta yoluyla

Çantayı geri gönderirken lütfen aşağıdakileri dikkate alınız:

- Etiketleri görüş alanına çekiniz ve döndürünüz
→ **Viollier AG adresi görünür**
- Etiketleri tekrar şeffaf alana ekleyiniz
- Çantayı teslimat kapsamında yer alan kırmızı kapatma klips ile kapatınız
- Viollier posta bedelini karşılamaktadır



