



Accessori

- Apparecchio con astuccio e cinghia da collo regolabile
- Cinghia toracica regolabile (lunga) e velcro (corto) per la fissazione al polso
- Sensore di saturazione di ossigeno con cavo di collegamento già inserito
- Sensore nasale con cavo di collegamento inserito
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rosso per la rispedizione

Rispedizione

A termine della registrazione la preghiamo di volerci rispeditare l'apparecchio con cavi inseriti, cinghia, velcro, sensore della saturazione di ossigeno e formulario di richiesta e diario del paziente. Le spese di spedizione sono a carico di Viollier.

- Tramite Servizio clientela – consegna allo studio medico
- Tramite DPD – consegna presso un Pickup parcelshop
→ dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Rimuovere l'etichetta dal campo visivo
- Far scorrere l'etichetta di restituzione appropriata (nella custodia) nel campo visivo
→ [l'indirizzo Viollier AG compare](#)
- Chiudere la valigetta con clip di chiusura rossa

Informazioni importanti

Non avviare l'apparecchio a titolo di prova → l'apparecchio non può più essere spento.

- Prima dell'esame rimuovere lo smalto e le applicazioni sulle unghie.
- Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h, nel caso di un utilizzo contemporaneo.
- Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi.
- Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 20 kg.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.

[illegible][illegible]

Diario del paziente

Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente.

Si prega di utilizzare una penna a sfera
nera, non una matita.

Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.




Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data da lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
- Il numero d'apparecchio e di sensore da dito indicato da Viollier nel formulario di richiesta

No. apparecchio	010	No. sensore ditale	015
-----------------	-----	--------------------	-----

Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato
formulario di richiesta già provvisto del suo
indirizzo.

Applicazione dell'apparecchio

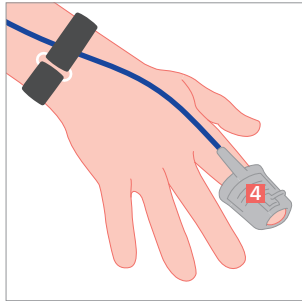
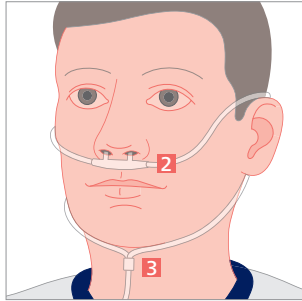
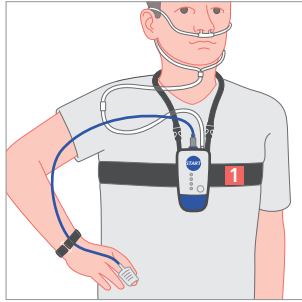


Applicare l'apparecchio prima di coricarsi

- L'apparecchio e la cinghia non vanno indossati direttamente sulla pelle.
- Passare la cinghia da collo unitamente all'apparecchio sopra la testa.
- Con l'ausilio della **cinghia del torace 1** fissare l'apparecchio al centro all'altezza dello sterno → **per gli uomini all'altezza dei capezzoli, per le donne sulla zona superiore del seno.**
- Tirare bene la cinghia del torace, tuttavia non così stretta da limitare la respirazione.
- Applicare il sensore nasale al di sotto del naso. Piazzare **l'apertura 2** nelle narici.
- Far passare il cavo dietro le orecchie, stringere **il dispositivo per il fissaggio del cavo 3** sotto al mento e adattarlo.

Fissare il sensore da dito

- Applicare al dito il sensore di saturazione di ossigeno con il simbolo dell'unghia verso l'alto. Infilare il sensore da dito fino a quando è visibile il polpastrello. → durante la notte è consentito spostare il sensore da un dito **4** all'altro.
- **Adatti sono: indice, medio, anulare (senza smalto).**
- Fissare con il velcro il cavo del sensore al polso.

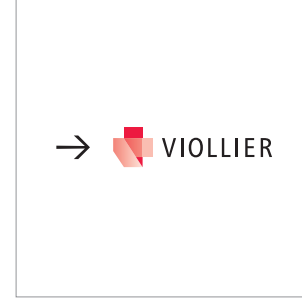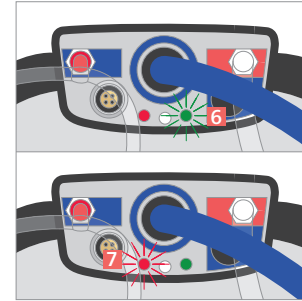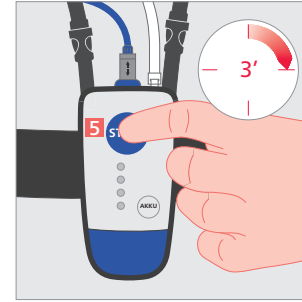

Avviare l'apparecchio

- Tenere premuto il tasto start anteriore **blu 5** per 3 secondi.
 - Durante la registrazione lampeggia ogni 4 secondi la luce **verde 6**. Se accanto appare una luce **rossa 7**, il sensore del dito non è applicato correttamente.
→ voglia per favore correggere.
 - Nel caso il sensore da dito / sensore nasale dovesse staccarsi durante la notte, si prega di applicare nuovamente.
- La mattina smontare l'apparecchio e rispedirlo.
- L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8 ore.**