

## Poligrafia sotto terapia CPAP




### Accessori

- Apparecchio di poligrafia con astuccio e cinghia da collo
- Cintura toracica regolabile (lunga) con due sensori integrati per il torace
- Cintura addominale regolabile (lunga) con un sensore addominale integrato
- Sensore di saturazione di ossigeno con cavo di collegamento già inserito e cinturino in velcro (corto) per il fissaggio al polso
- Adattatore per apparecchio CPAP del paziente
- Apparecchio CPAP del paziente con tubo e maschera

## Informazioni importanti

- **Non avviare il registratore a titolo di prova  
→ il registratore non può più essere spento**
- Prima dell'esame rimuovere lo smalto, le unghie in gel o le applicazioni sulle unghie
- Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h, nel caso di un esercizio contemporaneo
- Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi
- Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 50 kg
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione
- Compilare il diario del paziente allegato in modo corretto e completo

## Applicazione dell'apparecchio

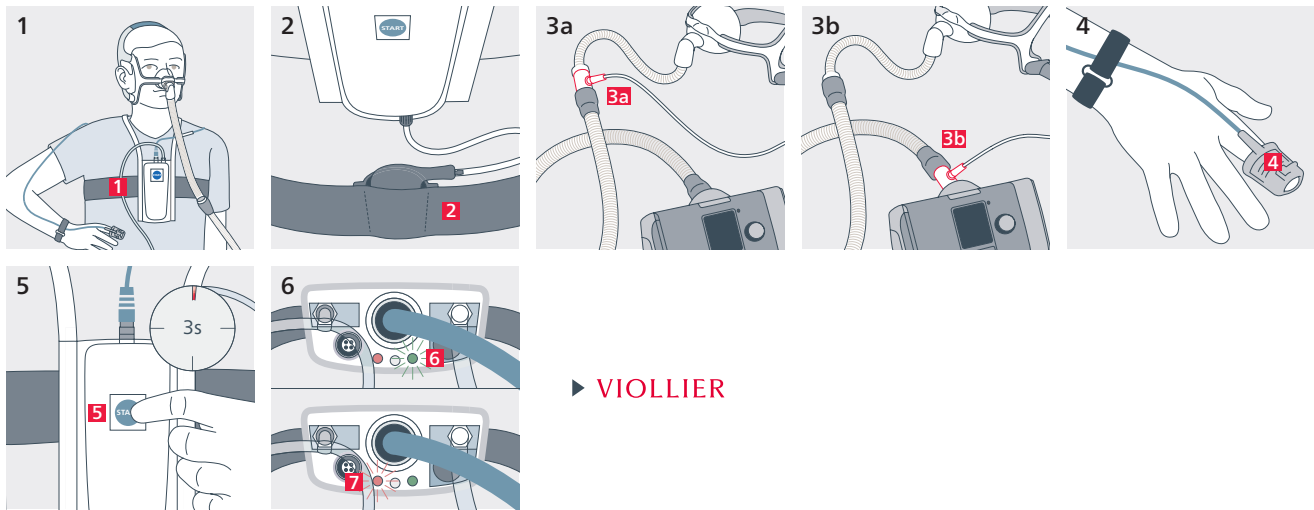

► VIOLIER

### 1 Applicare l'apparecchio prima di coricarsi

- Apparecchio, cinghia del torace e cinghia addominale non vanno indossati direttamente sulla pelle
- Passare la cinghia da collo unitamente all'apparecchio sopra la testa
- Con l'ausilio della cinghia del torace **1** fissare l'apparecchio al centro all'altezza dello sterno  
→ **per gli uomini all'altezza dei capezzoli, per le donne sulla zona superiore del seno**
- Fissare il sensore addominale **2** tirando la cinghia addominale attorno all'addome (all'altezza dell'ombelico). Il sensore di pressione deve trovarsi sul lato interno della cinghia. Stringere entrambe le cinghie, tuttavia non così strette da limitare la respirazione

### 3a / 3b Collegare l'apparecchio CPAP del paziente con l'adattatore

Variante 1:

#### Adattatore tra maschera e tubo **3a**

- Staccare il pezzo centrale, maschera inclusa, dal tubo dell'apparecchio CPAP
- Inserire l'adattatore nel tubo dell'apparecchio CPAP
- Collegare il pezzo centrale, maschera inclusa, all'adattatore

Variante 2:

#### Adattatore tra apparecchio CPAP e tubo **3b**

- Staccare il tubo dell'apparecchio CPAP dall'apparecchio CPAP
- Collegare l'apparecchio CPAP all'adattatore
- Collegare il tubo dell'apparecchio CPAP all'adattatore

### 4 Fissare il sensore ditale

- Applicare al dito il sensore di saturazione di ossigeno con il simbolo dell'unghia verso l'alto. Infilare il sensore ditale fino a quando è visibile il polpastrello.  
→ Durante la notte è consentito spostare il sensore ditale **4** a un altro dito
- **Sono adatti indice, medio e anulare (senza smalto, unghie in gel o applicazioni sulle unghie)**
- Fissare con il velcro il cavo del sensore al polso
- Nel caso il sensore ditale dovesse staccarsi durante la notte, si prega di applicare nuovamente

### 5 – 6 Avviare l'apparecchio per poligrafia

- Tenere premuto il **tasto start anteriore blu 5** per 3 secondi
- Durante la registrazione lampeggia ogni 4 secondi la **luce verde 6**. Se accanto appare una **luce rossa 7**, il sensore del dito non è applicato correttamente → voglia per favore correggere

### Avviare l'apparecchio CPAP

- Indossare la maschera dell'apparecchio CPAP sul viso e avviare l'apparecchio CPAP secondo le istruzioni del produttore
- **L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8 ore**
- Al mattino smontare l'apparecchio e riportarlo alla Herz-Lungen-Praxis