

Pulsossimetria sotto terapia CPAP



Accessori


- Apparecchio di pulsossimetria con astuccio e cinghia da collo
- Cinghia del torace regolabile (lunga)
- Sensore di saturazione di ossigeno con cavo di collegamento già inserito e cinturino in velcro (corto) per il fissaggio al polso
- Adattatore per apparecchio CPAP del paziente
- Apparecchio CPAP del paziente con tubo e maschera



Informazioni importanti

- **Non avviare il registratore a titolo di prova
→ il registratore non può più essere spento**
- Prima dell'esame rimuovere lo smalto, le unghie in gel o le applicazioni sulle unghie
- Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h, nel caso di un esercizio contemporaneo
- Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi
- Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 20 kg
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione
- Compilare il diario del paziente allegato in modo corretto e completo

Applicazione dell'apparecchio

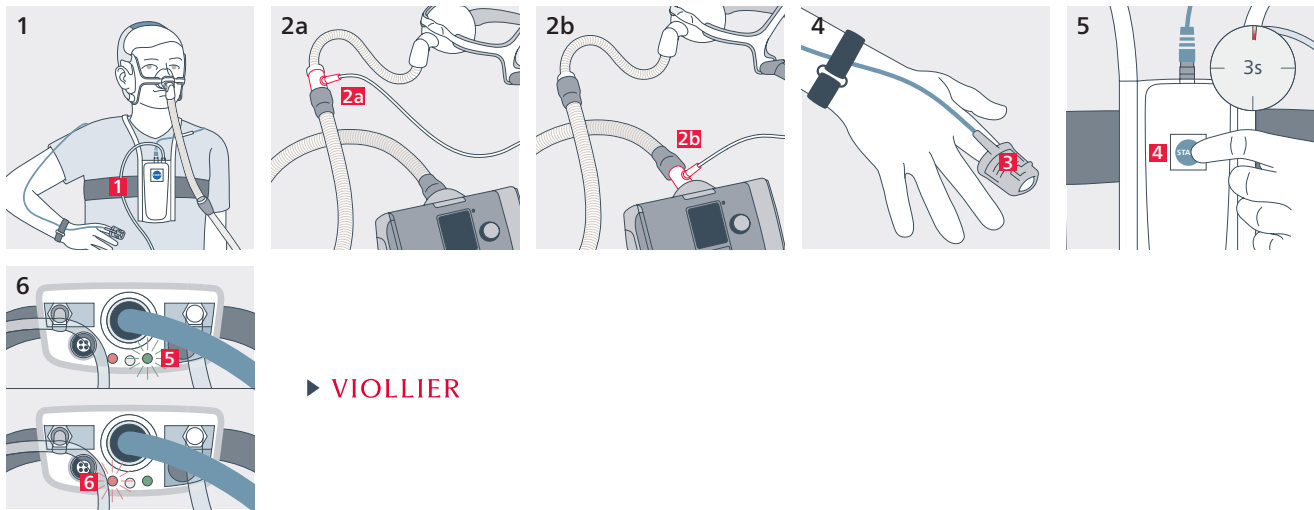

► VIOLLIER

1 Applicare l'apparecchio prima di coricarsi

- L'apparecchio e la cinghia non vanno indossati direttamente sulla pelle. Passare la cinghia da collo unitamente all'apparecchio sopra la testa
- Con l'ausilio della cinghia del torace **1** fissare l'apparecchio al centro all'altezza dello sterno
→ **per gli uomini all'altezza dei capezzoli, per le donne sulla zona superiore del seno.**
Tirare bene la cinghia del torace, tuttavia non così stretta da limitare la respirazione

2a / 2b Collegare l'apparecchio CPAP del paziente con l'adattatore

Variante 1:

Adattatore tra maschera e tubo **2a**

- Staccare il pezzo centrale, maschera inclusa, dal tubo dell'apparecchio CPAP
- Inserire l'adattatore nel tubo dell'apparecchio CPAP
- Collegare il pezzo centrale, maschera inclusa, all'adattatore

Variante 2:

Adattatore tra apparecchio CPAP e tubo **2b**

- Staccare il tubo dell'apparecchio CPAP dall'apparecchio CPAP
- Collegare l'apparecchio CPAP all'adattatore
- Collegare il tubo dell'apparecchio CPAP all'adattatore

4 Fissare il sensore ditale

- Applicare al dito il sensore di saturazione di ossigeno con il simbolo dell'unghia verso l'alto. Infilare il sensore ditale fino a quando è visibile il polpastrello.
→ Durante la notte è consentito spostare il sensore ditale **3** a un altro dito
- **Sono adatti indice, medio e anulare (senza smalto, unghie in gel o applicazioni sulle unghie)**
- Fissare con il velcro il cavo del sensore al polso
- Nel caso il sensore ditale dovesse staccarsi durante la notte, si prega di applicare nuovamente

5 – 6 Avviare l'apparecchio per pulsossimetria

- Tenere premuto il **tasto start anteriore blu 4** per 3 secondi
- Durante la registrazione lampeggia ogni 4 secondi la **luce verde 5**.
Se accanto appare una **luce rossa 6**, il sensore del dito non è applicato correttamente
→ voglia per favore correggere

Avviare l'apparecchio CPAP

- Indossare la maschera dell'apparecchio CPAP sul viso e avviare l'apparecchio CPAP secondo le istruzioni del produttore
- **L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8 ore**
- Al mattino smontare l'apparecchio e riportarlo alla Herz-Lungen-Praxis